


ABraCadabra

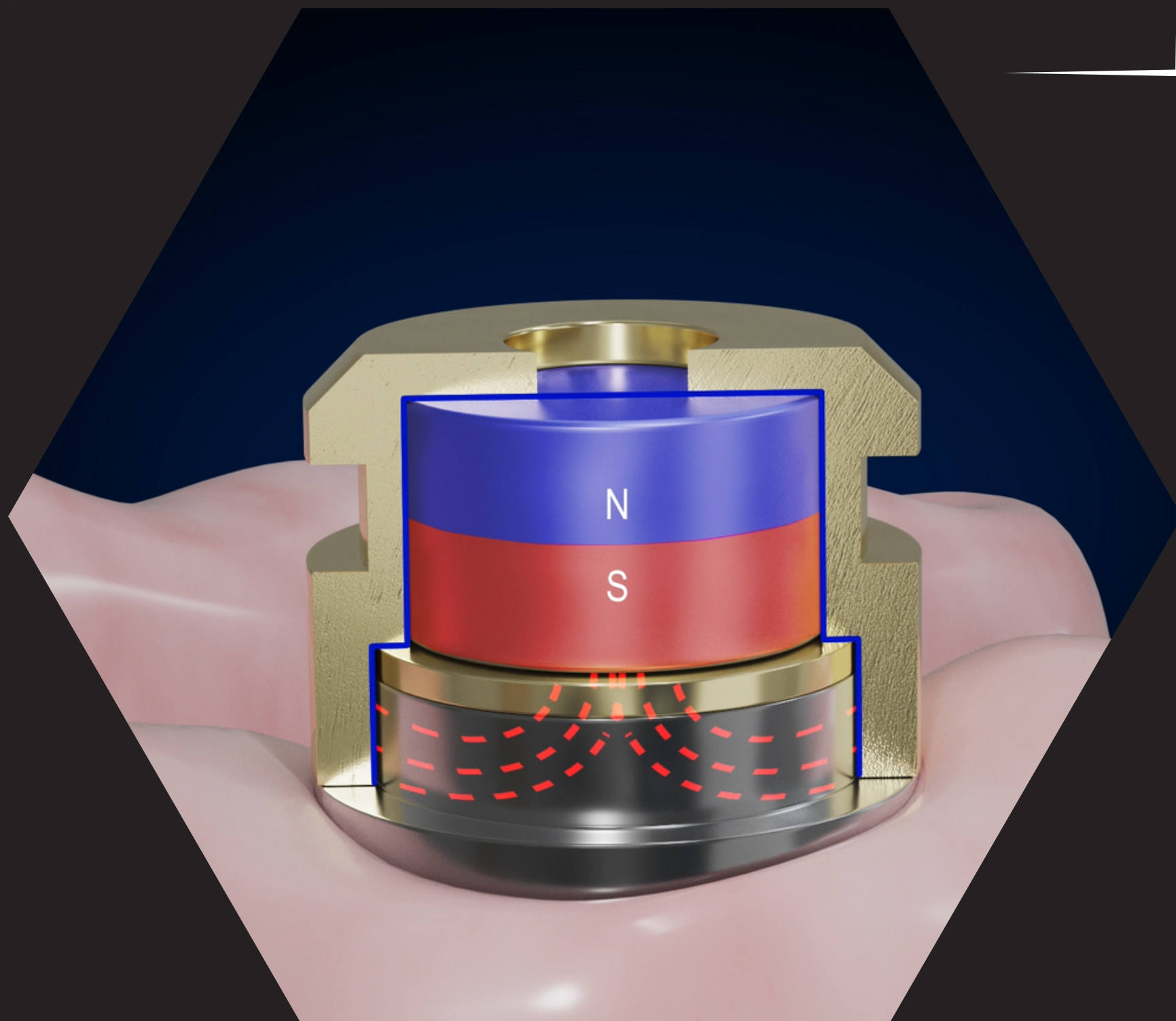

TELEMAGNETICS

שיקום נשלף על-גבי שתלים
עם תיקון זווית,
מקביליות מושלמת
ואחיזה מגנטית

- מהלך העבודה -

פנו אלינו לתיאום המקרה וקבלו ייעוץ מייד



הפרטים הנחוצים לנו:

1. איזה לסת? כמה שתלים?

מיקום וסוג השתלים?

2. אם ניתן, שלחו אלינו צילום

פנורמי או CT של המטופל

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

מידות ורטנציה

דרישות בסיסיות ופרטים חשובים!

מרווח בין לסתי וגובה מינימלי:

- המרווח המינימלי הנדרש מהשתל ללסת הנגדית - 8 מ"מ.
- המרווח המינימלי הנדרש מגבול החניכיים ללסת הנגדית - 6.5 מ"מ.

מידות ה-Housing של המגנט:

- גובה - 4.6 מ"מ
- קוטר - 5.3 מ"מ

רטנציה - כוח אחיזה:

- רטנציה בסיסית - 5.5 ניוטון
- ניתן להגביר עד 8 ניוטון תוך שימוש ב-Housing גבוה יותר

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

נטילת מטבעים / סריקה



- קחו מטבע עם טרנספרים ברמת השתלים / סריקה עם גופי סריקה.
- נשמח לספק לכם גופי סריקה למשושה פנימי במידת הצורך.
- בנטילת מטבע - ניתן לקחת בכף פתוחה או סגורה, לבחירתכם.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

משלוח המידות ל"אברקדברה"




- שלחו אלינו את הסריקות או צרו עמנו קשר לתיאום משלוח המידה הפיזית.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

תכנון המקרה וייצור המבנים

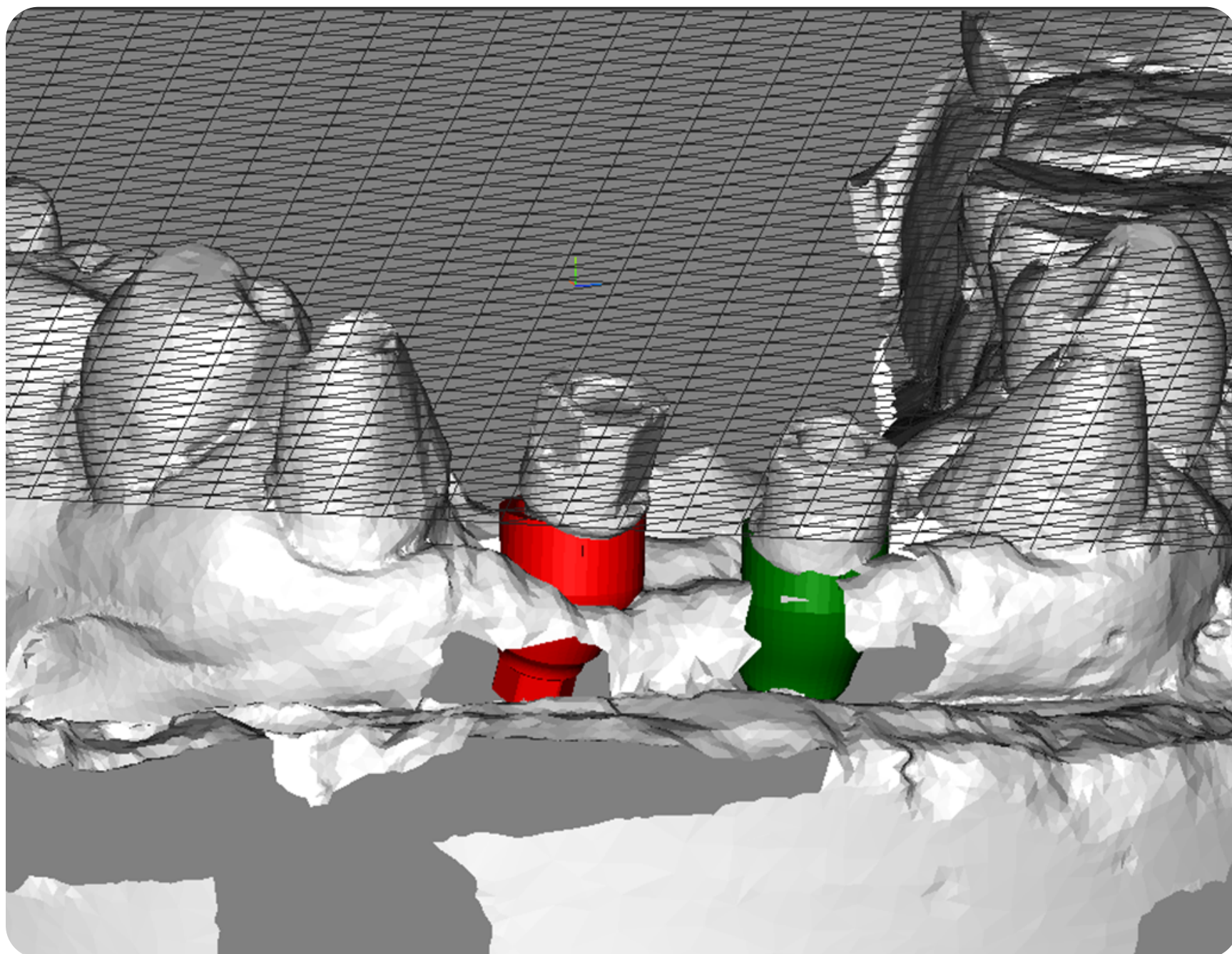

- אנו נתכנן את המקרה ונעביר את המבנים לייצור.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

יצירת התותבת - במעבדה



• נשלח לטכנאי המלווה שלך מודל ממוחשב של הלסת עם המבנים ועם ספייסרים המציגים את החלל המדויק שיש להשאיר בתותבת לצורך חיבור המגנטיים.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

משלוח המבנים




- לאחר סיום ייצור המבנים, נשלח אליך קופסה ובה המבנים, ג'יג מדידה, ומגנטים המיועדים לחיבור התותבת.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

התקנת המבנים

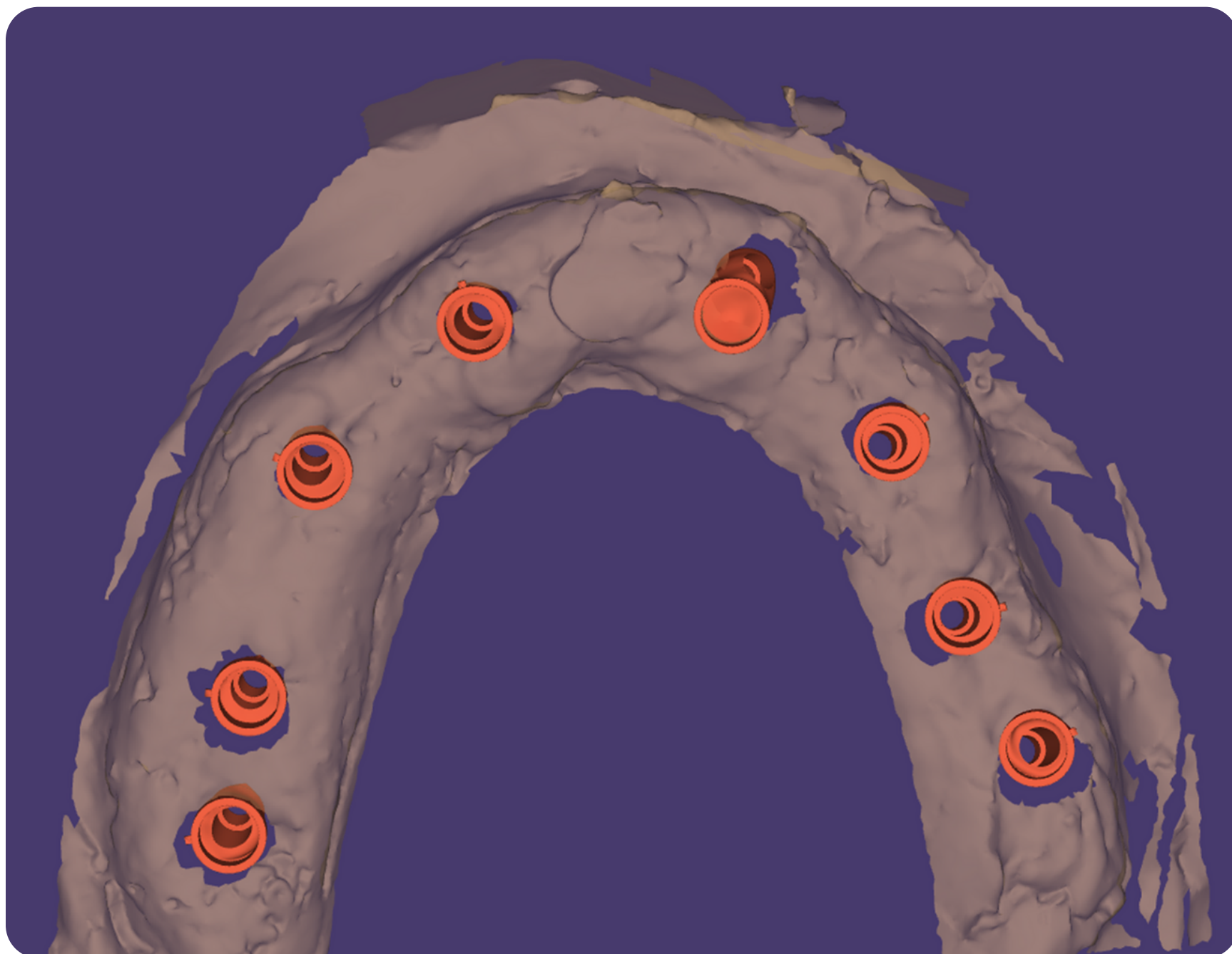

- התקינו את המבנים על השתלים.
כל מבנה יותקן על השתל אליו
הוא משויך
- יש להקפיד על כיוון נכון של
המבנים בהתאם לסימון הבוקלי
ולשרטוט המצורף.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

בדיקת התקנה נכונה



- יש להושיב על המבנים את הג'יג שסופק עמם, ולודא שהוא נוגע בכתפיים של כל המבנים, ב-360 מעלות.


TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

10

חיזוק הברגים

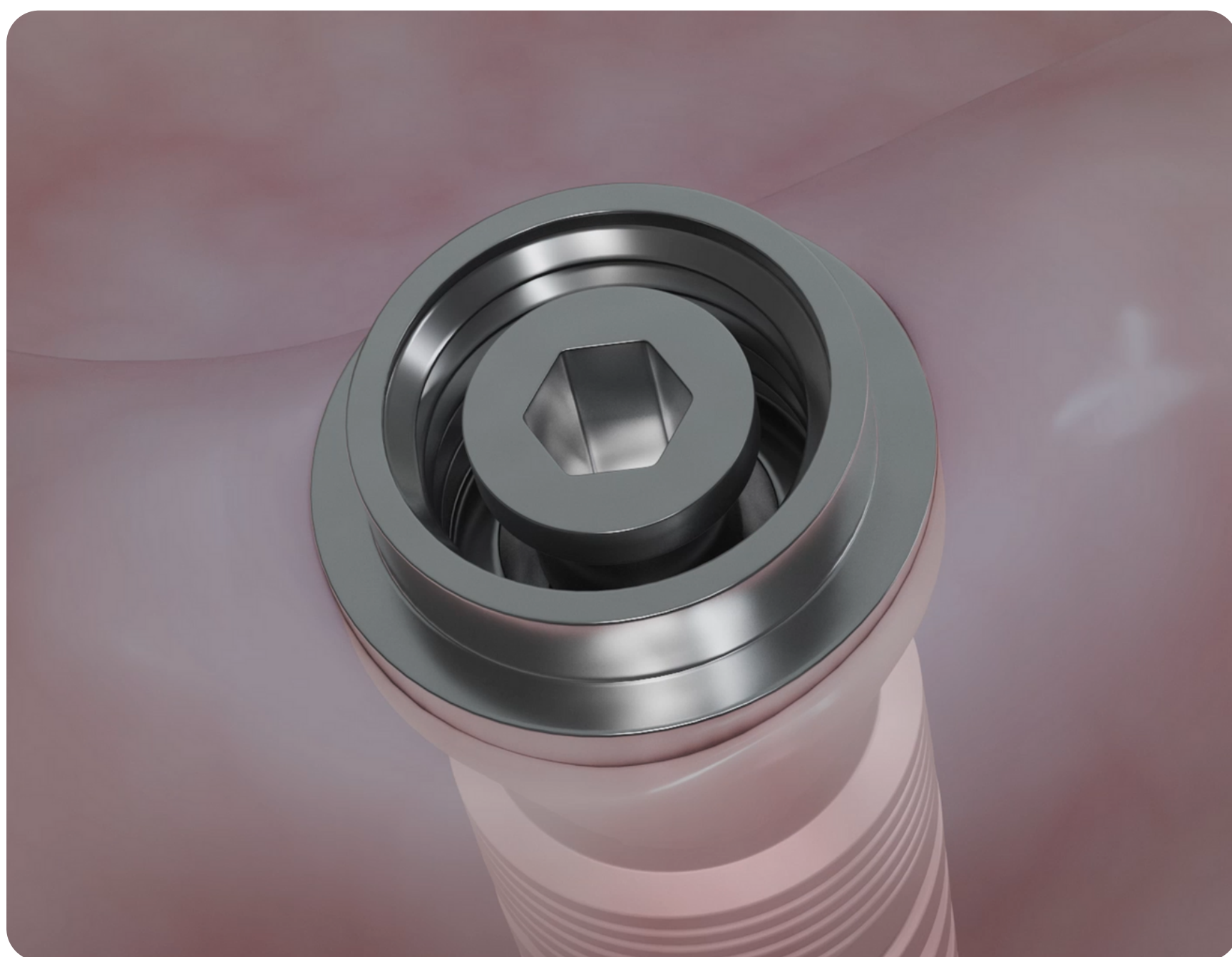


- יש להדק את ברגי האחיזה של המבנים ב-torque של 15-20 Ncm

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

הברגת ה-Keeper

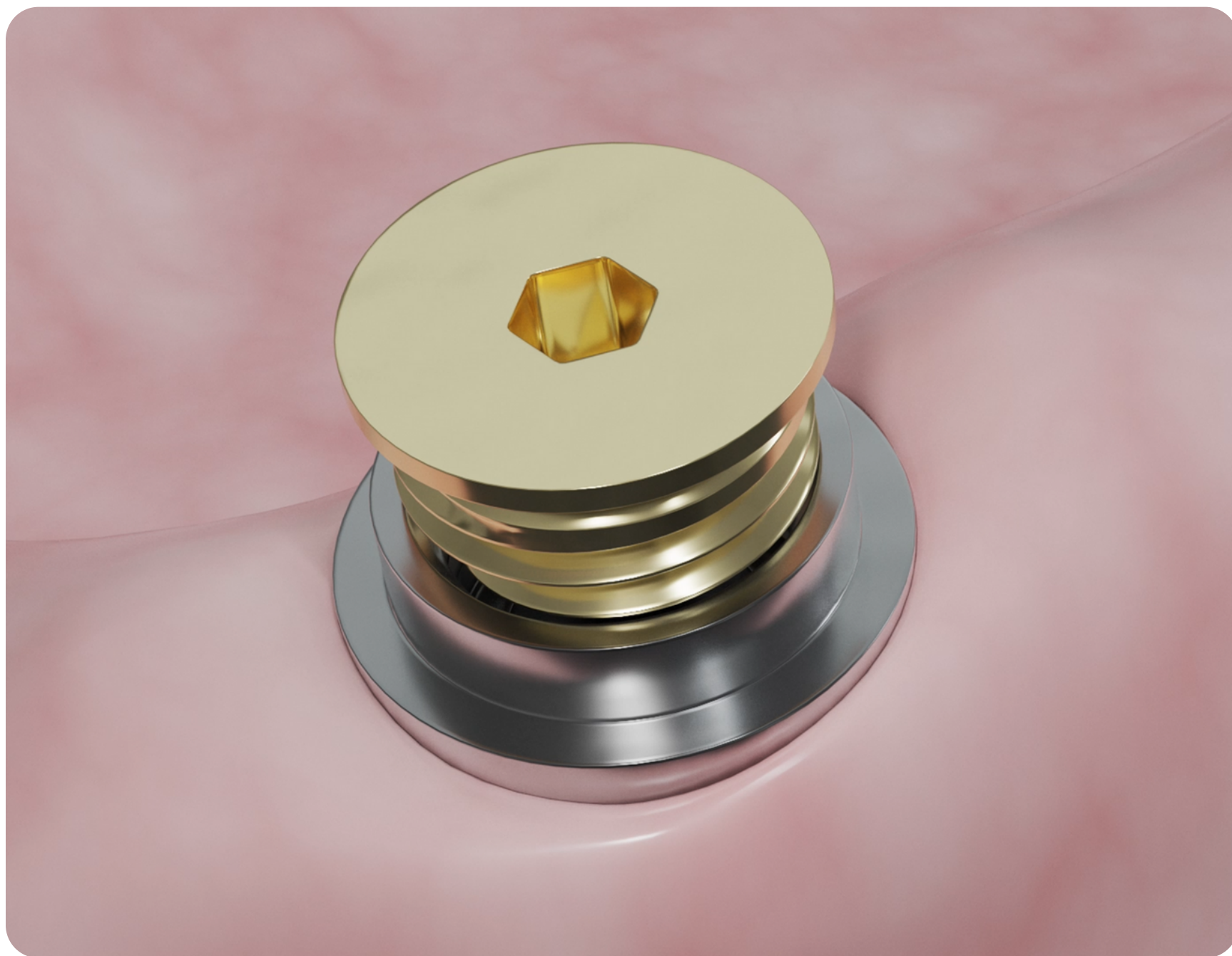


- הבריגו את ה-Keeper המוזהב לכל אחד מהמבנים, באמצעות מפתח שתלים סטנדרטי (1.25 מ"מ).

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

התקנת המגנטים

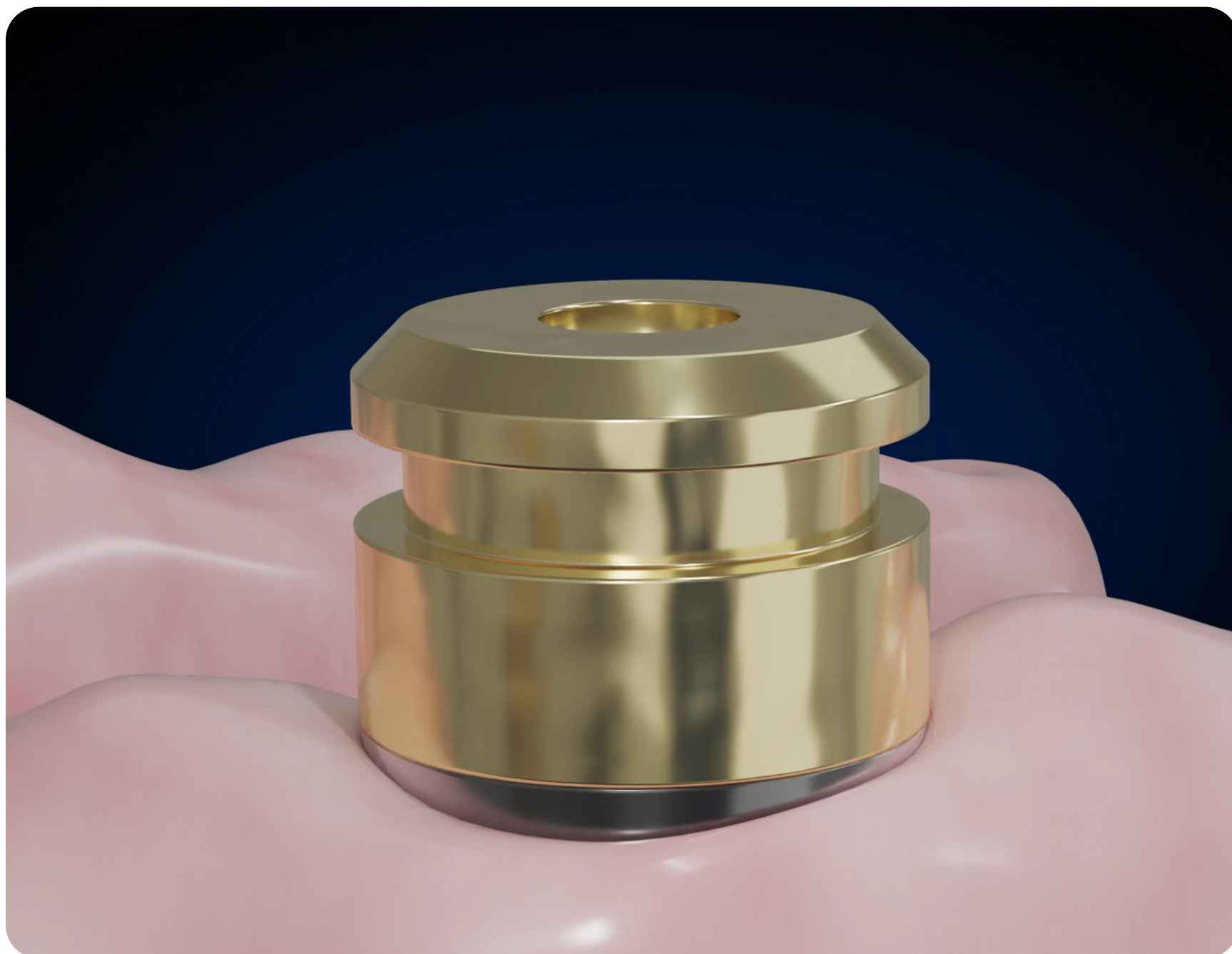


- הושיבו את הבית (housing) ובתוכו המגנט על-גבי כל אחד מהמבנים.
- וודאו שהמגנט יושב בצמוד ל-keeper וללא הפרעות.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

מדידת התותבת

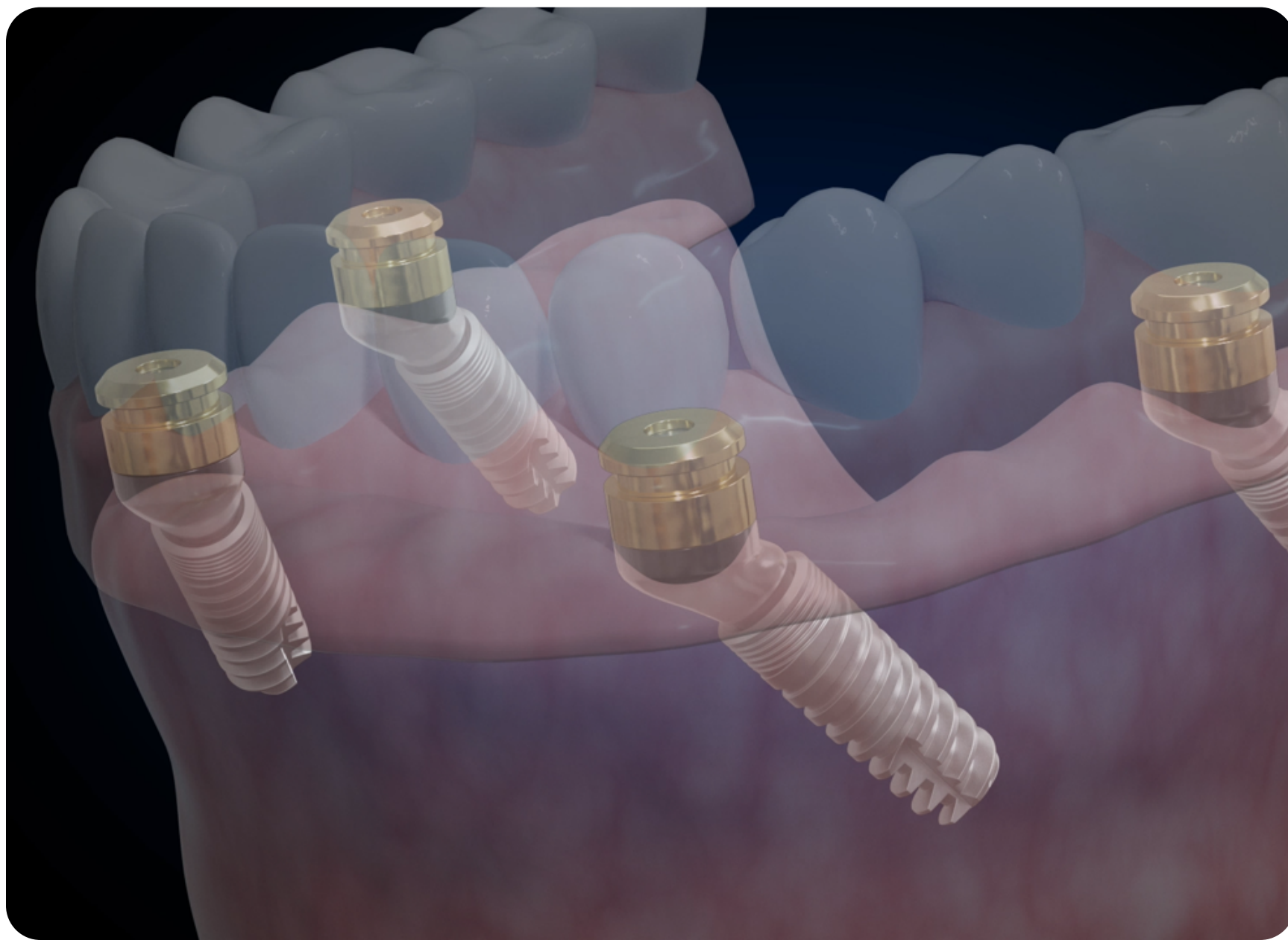


- הושיבו את התותבת בפה המטופל – בשלב זה ללא ריפוד או אקריל נוזלי – וודאו שהיא יושבת באופן מאוזן ושאין הפרעות בגובה או מגעים בכירים עם אחד המגנטיים.
- במידה שיש undercut באחד המבנים, דאגו לחסום אותו.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

חיבור המגנטים לתותבת

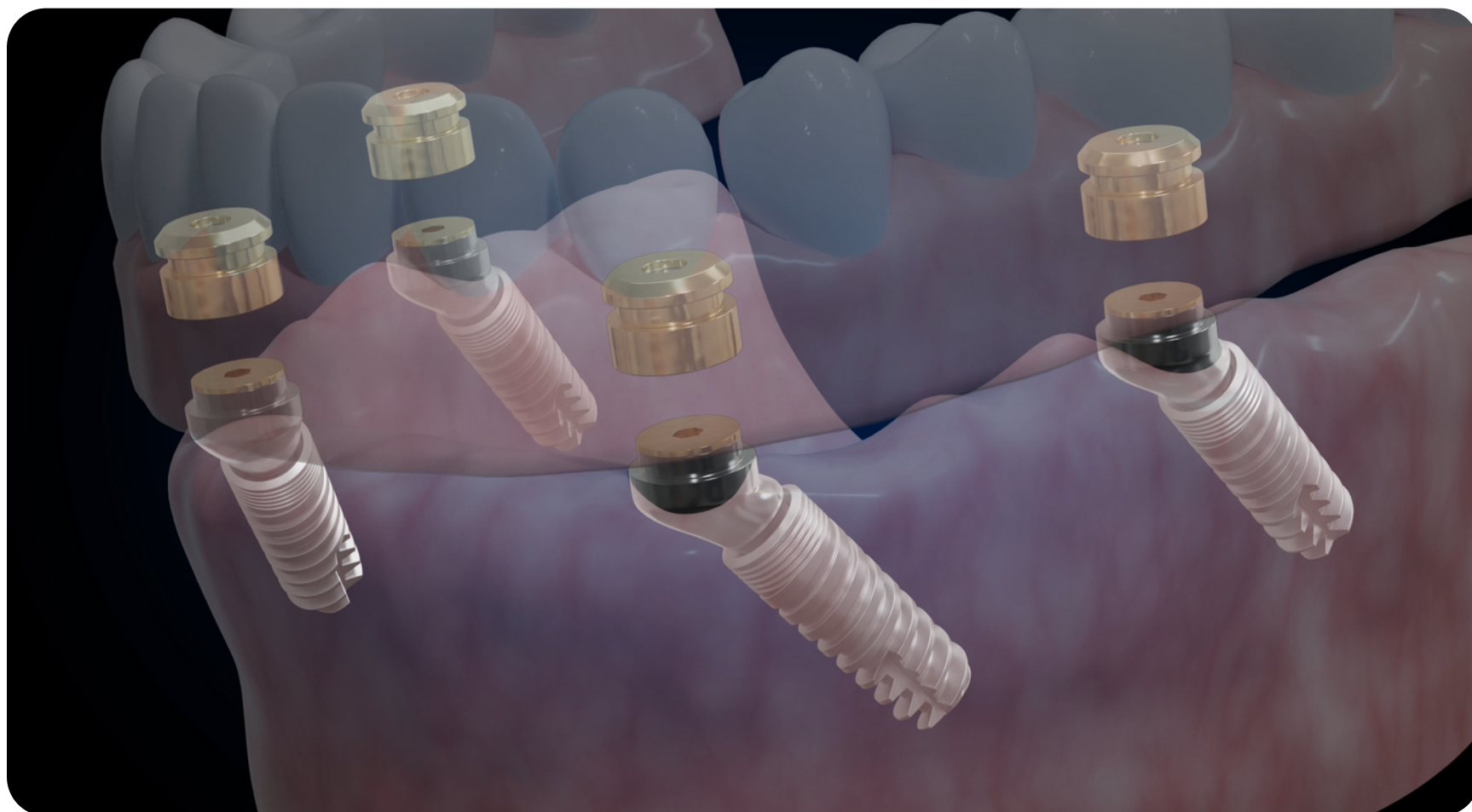


- מלאו את החורים המוכנים מראש בתותבת באקריל נוזלי.
- הושיבו את התותבת על-גבי הלסת עם המגנטים ובקשו מן המטופל לסגור.
- המתינו להתקשות והוציאו את התותבת עם המגנטים המחוברים עליה. נקו עודפי חומר.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

תחזוקה

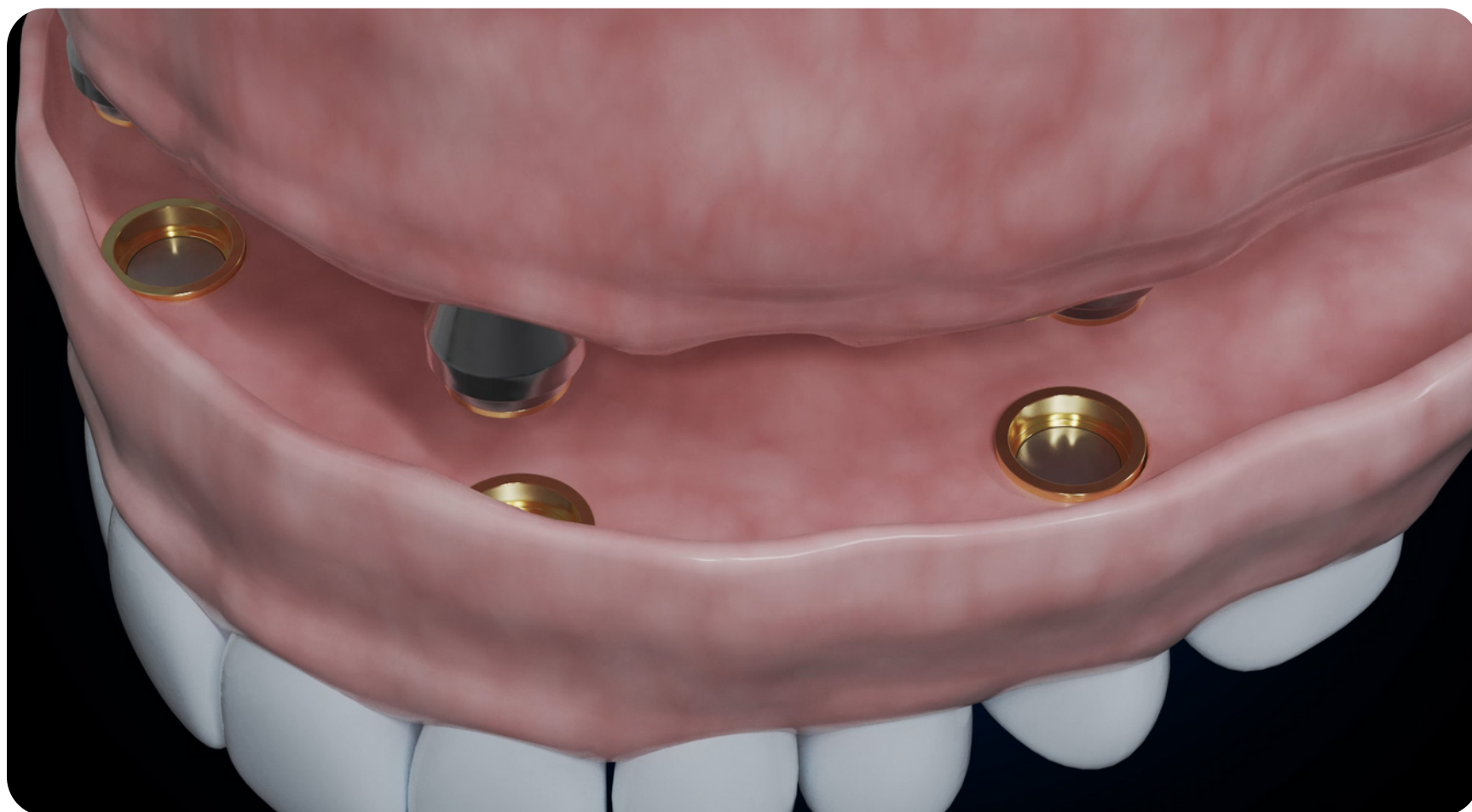

- יש להדריך את המטופל לשטוף את פנים התותבת היטב ולסלק שאריות אוכל במידה שישנן בתוך המגנטיים.
- ניתן לקבוע ביקורת תקופתית לצורך בדיקת הריפוד ושלמות התותבת.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra

מחירון

- מבנים מגנטיים ל-2 **שתלים** - 1800 ש"ח
- מבנים מגנטיים ל-4 **שתלים** - 3200 ש"ח
- כל שתל נוסף - 800 ש"ח

- המחירים המצוינים לעיל הם **עבור מקרה קליני (לסת אחת)** וכוללים: ייעוץ ותכנון ממוחשב של המבנים, מבנים מותאמים לכל שתל בהתאם לסוג השיקום שנבחר, גייד להתקנה וחלקים נלווים - ללא צורך ברכישת חלקים נוספים.
- המחירים לעיל אינם כוללים שיקום זמני או קבוע.
- המחירים אינם כוללים מע"מ.

TELEMAGNETICS

BY

ABraCadabra